

恩诺沙星残留胶体金快速检测卡使用说明书

产品编号：YB117R01K

概要

恩诺沙星 (Enrofloxacin, ENR)属于氟诺酮药类高效抗菌药物，被广泛应用于畜牧业和水产养殖业中动物疾病的预防和治疗。由于其耐药性和潜在的致癌性引起广泛的关注。随着恩诺沙星在养殖中大量、不规范应用、它在畜禽、水产品等动物性食品中的残留问题也日益被重视。本产品适用于企业、检测机构、监督部门等各类现场快速检测。

检测原理

本产品应用竞争抑制胶体金免疫层析的原理制成，用于检测禽蛋样本中恩诺沙星残留。样本溶液滴入检测卡的加样孔后，样本溶液中的恩诺沙星与金标抗体相结合，从而阻止金标抗体与纤维素膜上恩诺沙星偶联物结合。根据 T 线与 C 线的显色深浅判断结果。

适用范围

本产品适用于鸡蛋、鸭蛋等鲜蛋样本中恩诺沙星药物的定性检测。

注：检测样本种类参照国标 GB2763-2021。

检出限

10 ppb($\mu\text{g/kg}$)

试剂盒组成

序号	组成	规格	10 次/盒	20 次/盒
(1)	检测卡(内含滴管、干燥剂)		10份	20份
(2)	稀释液		1瓶	2瓶
(3)	7mL离心管		10支	20支
(4)	1.5 mL检测管		10支	20支
(5)	0.3 mL吸管		10支	20支
(6)	说明书		1份	1份

注意事项

- (1) 每次检样前，剪碎样本的刀具需进行清洗，避免交叉污染。
- (2) 检测环境温度应控制在 18~30℃，温度过高或过低，将影响检测结果。
- (3) 请按照检测步骤进行测试，操作时请勿触摸试纸条显色区，避免阳光直射和电风扇直吹。
- (4) 样本处理后请尽快使用，时间过长则需要重新处理样本再检测。
- (5) 待检样品溶液需澄清，否则容易导致显色不明显等异常现象，影响实验结果判定。
- (6) 过期或铝箔袋破损的产品均不可使用，拆封后的检测卡请立即使用。
- (7) 本产品为一次性产品，请勿重复使用或混用来自不同批次的检测卡。
- (8) 出现阳性结果时建议复测，本产品检测结果仅供参考，如需确证，请参照国家相关标准方法。
- (9) 产品评价时，若需直接检测标准品，需用试剂盒内的专用稀释液配制。
- (10) 自来水、蒸馏水、纯净水或去离子水不能作为阴性对照。

安全性说明

- (1) 实验需匹配相应的实验设备和穿戴必需的实验装备(白服、手套、口罩等)。
- (2) 检测试剂盒需保存请放在儿童不易接触的地方。
- (3) 实验所用全部物品，应用完毕后应妥善处理。
- (4) 实验后要保持实验室的整洁和实验环境空气的流通性。
- (5) 实验废弃物单独收集，建议按照医疗废弃物处理。
- (6) 请勿食用配备的试剂。

贮藏条件及有效期

- (1) 贮藏条件：2-30℃避光保存，勿冷冻。
- (2) 有效期：12 个月。

恩诺沙星胶体金快速检测卡使用说明书

需自备的工具



天平 (精度0.01g)



匀质器



移液器 (0.2mL、1mL)



涡旋仪



计时器


样本前处理步骤

(1) 将新鲜的禽蛋打碎至杯中，充分混匀（蛋清和蛋黄充分搅匀）。



混匀

(2) 吸取 1 克搅匀的禽蛋样本于检测管中，再加入 5 mL 稀释液。

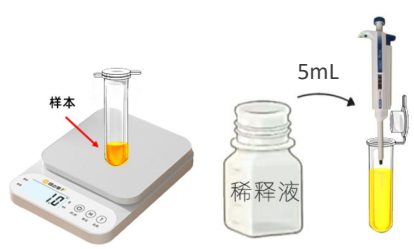

样本 5mL 稀释液


(3) 剧烈振荡 1 分钟或用滴管反复吸打检测管中的液体（吸打次数不少于 10 次），作为样品液。取稀释液 200 μ L,再加入 100 μ L 样本液,作为待测液。



振荡 样品液 2:1 按比例稀释 取离心管 待测液


样本检测步骤

(1) 从原包装袋中取出检测卡和滴管，放于平整、洁净的台面上。

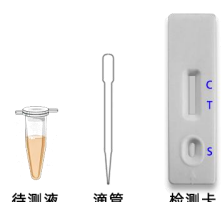

待测液 滴管 检测卡

(2) 用移液器或滴管吸取 120 μ L (约 4 滴) 待测液。

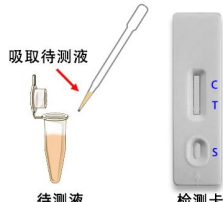


吸取待测液 待测液 检测卡

(3) 垂直缓慢滴加到检测卡的加样孔 (S) 中；液体流动时开始计时，反应 8 ~ 10 分钟，根据示意图判定结果，其他时间判定无效。




滴入加样孔，开始计时

结果判断

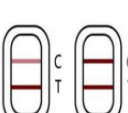

阴性

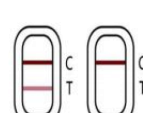

阳性



无效

目测：

阴性（未检出）：T 线颜色比 C 线颜色深或者一样深；

阳性（检出）：T 线颜色比 C 线浅或者 T 不显色；

无效：C 线不显色且无论 T 线是否显色。

仪器判读：详见仪器使用说明书。